



# Dossier d'information Euro Pharmat

## DISPOSITIF MEDICAL

Intitulé du Dispositif Médical	BARRIER® Casaque chirurgicale Classic standard (SP) avec 2 essuie-mains
N° de lot de l'appel d'offres	

**Remarque :** Selon le dispositif médical (DM) concerné, ce dossier concernera une référence, un type ou une famille de DM

<b>1. Renseignements administratifs concernant l'entreprise</b>		<b>Date de mise à jour :</b> 07/2020 <b>Date d'édition :</b> 07/2020
1.1	<b>Nom :</b> MÖLNLYCKE HEALTH CARE	
1.2	<b>Adresse complète :</b> 13 Allée du Château Blanc CS 70205 59290 WASQUEHAL CEDEX FRANCE	<b>Tel:</b> 03.20.12.25.55 <b>Site internet :</b> www.molnlycke.fr
1.3	<b>Coordonnées du correspondant matériovigilance :</b> Jean-Luc GROSHENY 13 Allée du Château Blanc CS 70205 59290 WASQUEHAL CEDEX FRANCE	<b>Tel :</b> 03.20.12.46.87 <b>e-mail :</b> jean-luc.grosheny@molnlycke.com
<b>2. Informations sur le dispositif ou équipement</b>		
2.1	<b>Dénomination commune :</b> selon la nomenclature d'Europharmat® Casaque chirurgicale	
2.2	<b>Dénomination commerciale :</b> BARRIER® Casaque chirurgicale Classic standard (SP) avec 2 essuie-mains	
2.3	<b>Code nomenclature :</b> E50AD01 <b>Code CLADIMED</b>	
2.4	<b>Code LPPR* (ex TIPS si applicable) :</b> * « liste des produits et prestations remboursables » inscrits sur la liste prévue à l'article L 165-1	
2.5	<b>Classe du DM :</b> classe Is <b>Directive de l'UE applicable :</b> 93/42/CEE <b>Selon</b> <b>Annexe n° Numéro de l'organisme notifié :</b> BSI n° 2797 <b>Date de première mise sur le marché dans l'UE :</b> 2007 <b>Fabricant du DM :</b> MÖLNLYCKE HEALTH CARE	
2.6	<b>Descriptif du dispositif (avec photo, schéma, dimensions, volume, ...)</b> : peut être relié au point 8 : selon fiche technique. <b>Éléments à préciser :</b> Descriptif standardisé par dénomination commune quand il existe dans la base de données. Trousse : Non Si Oui : Composition de la trousse	
Insertion photos : relié au point 9		

**2.7** **Références Catalogue** : peut être relié au point 8 : selon fiche technique

Pour chaque référence préciser :

**REFERENCE** : 650102

**N° Conditionnement / emballages** :

**UCD** (Unité de Commande) :

1

Emballage individuel

**CDT** (Multiple de l'UCD) :

20

Boîte distributrice (ou sachet)


**QML** (Quantité minimale de livraison) :

40

Carton

**Descriptif de la référence** :

Taille L - Longueur : 121 cm  
 Avec 1 feuille de papier crêpe et 2 essuie-mains  
 Traitement anti-alcool sur toute la surface  
 A : 22 cm ; B : 54 cm  
 C : 56 cm ; D : 29 cm  
 E : 7 cm ; F : 66 cm  
**G : 121 cm ; H : 154 cm**

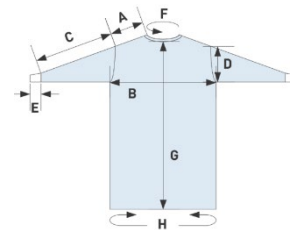

**Caractéristiques de la référence** : Unité, Valeur

**Étiquetage** : fac-similé du modèle d'étiquetage ou étiquette de traçabilité

Insertion image sous format pdf à insérer au point 9.

**2.8** **Composition du dispositif et Accessoires** : pour chaque élément ou composant, préciser :

**ELEMENTS** : \_\_\_\_\_ **MATERIAUX** : \_\_\_\_\_

**Substances actives** :

Corps et manches : fabrication SPUNLACE, matériau nontissé 68 g/m<sup>2</sup> en fibres de cellulose et polyester • Poignets : jersey blanc 100% polyester

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et/ou les produits administrés, précisions complémentaires :

- Présence/Absence de latex : Absence
  - Présence/Absence de phtalates (DHP) : Absence
  - Présence/Absence de produit d'origine animale ou biologique (nature, ...) : Absence
- Toutes mentions jugées utiles pour les précautions d'utilisation

**Dispositifs et accessoires associés à lister**. (en cas de consommables captifs notamment)

2.9	<p><b>Domaine - Indications :</b>          Domaine d'utilisation (selon liste Europharmat) : <b>Habillement long en nontissé utilisé au bloc opératoire pour la protection du patient, du personnel médical et paramédical</b>          Indications (selon liste Europharmat) :          Pour toute information complémentaire sur les indications se reporter au fichier pdf « Conditions de conservation, stockage, sécurité d'utilisation, conseils d'utilisation et informations complémentaires »</p>
<b>3. Procédé de stérilisation :</b>	
	<p><b>DM stérile :</b> <b>Oui</b>  <b>Mode de stérilisation du dispositif :</b> <b>Stérilisation par irradiation beta; gamma</b>          Préciser les modes de stérilisation de chaque composant, s'il y a lieu.</p>
<b>4. Conditions de conservation et de stockage</b>	
	<p>Conditions normales de conservation &amp; de stockage : <b>Mölnlycke Health Care recommande de stocker les produits BARRIER® dans des conditions normales de stockage. Tous les niveaux d'emballage doivent rester intacts jusqu'à ce que l'accès aux niveaux sous-jacents soit nécessaire.</b></p> <p>Précautions particulières : <b>Les installations de stockage des produits uniquement protégés par la barrière de stérilité doivent être conservées dans des conditions où le niveau de contamination par les particules d'air est faible, afin d'éviter tout risque pour le patient lors de l'ouverture de l'emballage et de l'utilisation du produit.</b></p> <p>Durée de la validité du produit : <b>5 ans</b></p> <p>Présence d'indicateurs de température s'il y a lieu.</p>
<b>5. Sécurité d'utilisation</b>	
5.1	<b>Sécurité technique :</b> le cas échéant, renvoyer à la notice d'utilisation ou notice d'information. Pour les DM implantables : passage possible à l'IRM, radio détectabilité ?
5.2	<b>Sécurité biologique (s'il y a lieu) :</b>
<b>6. Conseils d'utilisation</b>	
6.1	<p><b>Mode d'emploi :</b> <b>Les casques chirurgicales stériles à usage unique sont destinées au personnel soignant durant les interventions chirurgicales afin de protéger le patient et l'équipe chirurgicale contre le transfert de microorganismes, de fluides corporels et de particules.</b>          Le cas échéant, renvoyer à la notice (en annexe) et à la brochure (s'il y a lieu), en particulier pour l'ancillaire s'il y a lieu</p>
6.2	<b>Indications :</b> (destination marquage CE) : Dispositifs médicaux (DM)
6.3	<b>Précautions d'emploi :</b> Se rapporter à la notice en annexe (s'il y a lieu)
6.4	<p><b>Contre- Indications :</b>          Absolues et relatives. Se rapporter à la notice en annexe (s'il y a lieu)</p>
<b>7. Informations complémentaires sur le produit</b>	

**Bibliographie, rapport d'essais cliniques, ou d'études pharmaco-économiques, amélioration du service rendu : recommandations particulières d'utilisation :**

Cet espace ouvert est laissé à l'appréciation de l'industriel qui peut y inclure toute information pertinente permettant de fournir des éléments de discussion à l'utilisateur dans le cadre du Comité du Médicament et des Dispositifs Médicaux.

**Performance de la casaque conforme à la norme EN 13795 - Performance standard**

Caractéristiques	Unités	Exigences de la norme EN 13795 Performance standard		Performance de la casaque Classic standard (SP)	
		Zone critique	Zone moins critique	Zone critique	Zone moins critique
Résistance à la pénétration microbienne - état sec	UFC	Non requis	≤300	-	Matériau casaque / Couture d'épaule : 91/56
Résistance à la pénétration microbienne - état humide	BI	≥ 2,8	Non requis	Plastron/ Couture de manche : 3,1/3,1	-
Propreté - Microbiologique	UFC/100 cm <sup>2</sup>	≤300	≤300	32	32
Relargage particulaire	Log10	≤4,0	≤4,0	3,2	3,2
Résistance à la pénétration des liquides	cm H <sub>2</sub> O	≥20	≥10	Plastron/ Couture de manche : 30/24	Matériau casaque/ Couture de manche : 30/19
Résistance à l'éclatement - état sec	kPa	≥40	≥40	Plastron/ Manche : 115/268	Matériau casaque : 115
Résistance à l'éclatement - état humide	kPa	≥40	Non requis	Plastron/ Manche : 115/268	N/A
Résistance à la traction - état sec, MD	N	≥20	≥20	Plastron/ Couture de Manche : 124/43	Matériau casaque/ Couture d'épaule : 124/87
Résistance à la traction - état sec, CD	N	≥20	≥20	Plastron/ Couture de manche : 37/43	Matériau casaque / Couture d'épaule : 37/87
Résistance à la traction - état humide, MD	N	≥20	NR	Plastron/ Couture de Manche : 110/40	N/A
Résistance à la traction - état humide, CD	N	≥20	NR	Plastron/ Couture de manche : 38/40	N/A


### 8. Liste des annexes au dossier (s'il y a lieu)

- Etiquetage et étiquette de traçabilité (le cas échéant) : cf. point 9
- Brochure : catalogue produit disponible sur demande
- Manuel/Notice d'utilisation :
- Fiche technique : fiche technique fabricant disponible sur demande
- Autre : rapport de développement durable du groupe Mölnlycke Health Care disponible sur demande

### 9. Images (s'il y a lieu)

Format gif, jpeg, png

Photo du dispositif :

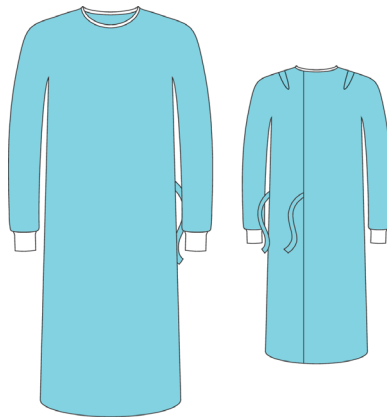

Conditionnement / Etiquettes de traçabilité :

Carton



Boîte distributrice ou sachet



Emballage individuel

