

Casaque chirurgicale BARRIER® - UNIVERSAL

Perméable à l'air pour plus de confort



Manches ergonomiques pour le confort et la liberté de mouvement

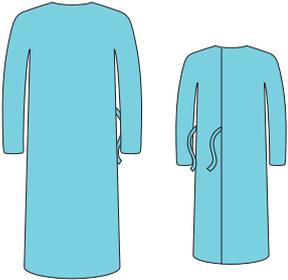


Les manchettes sont compatibles avec les gants Biogel®, empêchant les gants de glisser



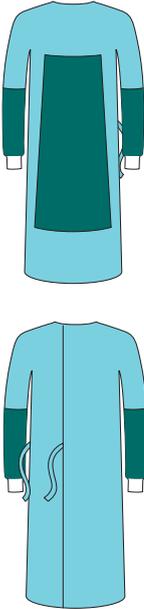
Grandes dimensions pour s'adapter à tous

- Matériau traité pour une résistance accrue au sang
- Perméable à l'air pour plus de confort
- Pliée de manière à permettre un enfilage aseptique
- Disponible en Performance Standard et Haute Performance¹

Performance Standard	N°. Réf.	Codes stériles	Taille	Longueur	Circonférence	Condit. int. / Condit. ext.
	93000620	CC SP, 2 essuie-mains, feuille de crêpe	M	119 cm	140 cm	-/30
	93000621	CC SP, 2 essuie-mains, feuille de crêpe	L	125 cm	152 cm	-/26
	93000622	CC SP, 2 essuie-mains, feuille de crêpe	L-L	140 cm	152 cm	-/26
	93000623	CC SP, 2 essuie-mains, feuille de crêpe	XL	135 cm	164 cm	-/26
	93000624	CC SP, 2 essuie-mains, feuille de crêpe	XL-L	151 cm	164 cm	-/24
	93000625	CC SP, 2 essuie-mains, feuille de crêpe	XXL-L	160 cm	176 cm	-/22

CC = Casaque chirurgicale

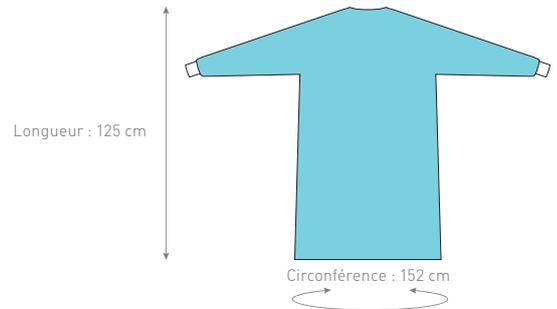
SP = Performance Standard

High performance	N°. Réf.	Codes stériles	Taille	Longueur	Circonférence	Condit. int. / Condit. ext.
  	93000720	CC HP, 2 essuie-mains, feuille de crêpe	M	119 cm	140 cm	-/28
	93000721	CC HP, 2 essuie-mains, feuille de crêpe	L	125 cm	152 cm	-/24
	93000722	CC HP, 2 essuie-mains, feuille de crêpe	L-L	140 cm	152 cm	-/24
	93000723	CC HP, 2 essuie-mains, feuille de crêpe	XL	135 cm	164 cm	-/24
	93000724	CC HP, 2 essuie-mains, feuille de crêpe	XL-L	151 cm	164 cm	-/22
	93000725	CC HP, 2 essuie-mains, feuille de crêpe	XXL-L	160 cm	176 cm	-/20

CC = Casaque chirurgicale

HP = Haute Performance

- Renfort imperméable (plastron et manches) pour ajouter une protection contre le passage des liquides
- Manches soudées aux ultrasons pour une résistance plus élevée aux liquides
- Renfort du plastron respirant



Mesures pour la taille L

Les casques chirurgicales UNIVERSAL sont aussi disponibles dans les trousse sur mesure Mölnlycke®.

Matériaux de la casaque

Casaque : Nontissé en fibres de polypropylène.
 Renfort du plastron : Nontissé polypropylène / film de polyéthylène.
 Renfort des manches : Nontissé polypropylène / film de polyéthylène.

Classification du produit

Casaques Performance Standard : Norme Européenne EN 13795 Performance Standard et ANSI/AAMI PB70 niveau 2.
 Casaques Haute Performance : Norme Européenne EN 13795 Haute Performance et ANSI/AAMI PB70 niveau 3^{1,2}.

Packaging

Les 3 niveaux d'emballage, la barrière de stérilité, le sac plastique et le carton de transport, contribuent à réduire le risque de contamination et les dommages pendant le transport et le stockage.

Environnement

Chez Mölnlycke Health Care, nous nous engageons depuis longtemps à minimiser l'impact de nos activités sur l'environnement, sans compromettre l'efficacité et la fiabilité de nos produits et services. De bonnes pratiques environnementales sont une priorité dans notre production et sur nos sites à travers le monde.

Références : 1. Norme européenne EN 13795 : Norme européenne harmonisée stipulant les exigences pour les champs chirurgicaux, casques et tenues de bloc utilisés comme dispositifs médicaux pour les patients, le personnel médical et les équipements et destinés à éviter la transmission d'agents infectieux entre les patients et le personnel médical durant les interventions chirurgicales. 2. ANSI/AAMI PB70 : Norme américaine qui établit un système de classification des casques et des champs opératoires en fonction de leur performance de protection contre les liquides.

Trouvez plus d'informations sur www.molnlycke.fr

Mölnlycke et BARRIER sont des marques et logos déposés au niveau mondial par la société Mölnlycke Health Care AB ou l'une de ses filiales. Pour l'ensemble des produits BARRIER, l'organisme notifié est le British Standards Institution (BSI). Organisme notifié 2797.
 Distributeur : Mölnlycke Health Care CS 70205 - 13 allée du Château Blanc - 59445 Wasquehal cedex
 Service clients : Tél.: 0800 915 188 - Email : csc.fr@molnlycke.com
 Renseignements produits : Tél.: 03 20 12 25 55
 Réclamations qualité : reclamation.qualite@molnlycke.com
 Fabricant : Mölnlycke Health Care, Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden - Tél.: +46 31 722 30 00 - Fax : +46 31 722 34 01
 © Copyright (2020) Mölnlycke Health Care. FRSU02932004.

